

# Simplifiez votre workflow, sans faire de compromis



## Nexus™ Universal

Un ciment de scellement résine vraiment universel

Grace à Nexus Universal, plus besoin de primer et d'activateur. Cela réduit la complexité du processus de scellement jusqu'à 50%. Simple et flexible.

Nexus Universal s'adapte à votre technique de scellement, pas besoin de changer votre protocole. Il se combine également avec tous les bonding universels, comme OptiBond™ Universal, qui fait partie de la famille de produits de référence Optibond™ le Golden Standard.

**Kerr™**

## Caractéristiques et avantages



### Scellement simplifiée

Nexus Universal réduit la complexité des étapes de scellement jusqu'à 50%. Vous serez bénéficier d'un flux de travail simplifié et plus efficace avec moins de risques d'erreurs.



### Faite à votre façon

Vous avez la liberté de continuer à utiliser votre protocole de scellement. Avec moins d'étapes et avec la certitude d'une bonne adhésion.



### Meilleure adhésion

Fournit une certitude les plus sûre par rapport aux autres ciments à base de résine adhésive, quel que soit le système adhésif universel que vous utilisez. Voir les graphiques des adhésifs universelles testés\*.




### Indicateur de couleur One-Peel™ Cleanup

Nexus Universal Chroma est rose et s'estompe à la teinte du ciment. Comme cela vous reconnaitrez le moment précis où l'excès de ciment peut être enlevé. Votre restauration est sûre avec One-Peel™.

## Processus de travail simplifié

Nexus Universal réduit la complexité des étapes de scellement jusqu'à 50%.

Technique simple de polymérisation auto avec un adhésif Optibond ou un autre adhésif universel.

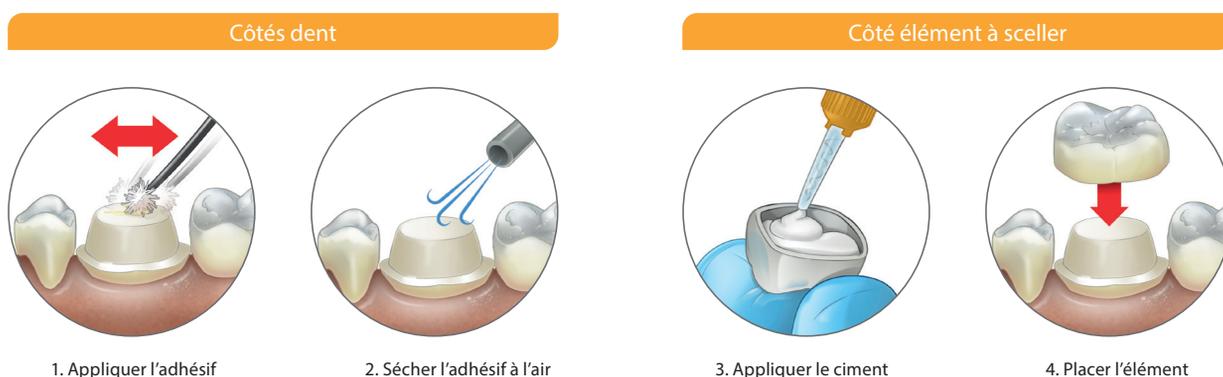

- Pas besoin d'activateur pour une polymérisation dual-cure

- Pas besoin de polymériser l'adhésif

- Pas besoin de métal primer et silane



+



+



+



+



+




= **seulement 2 composants**

Un travail simplifié, rapide et efficace signifie moins de risques d'erreurs.


## Donner un plus à votre adhésion

Nexus Universal en OptiBond Universal donnent une adhésion plus forte que les systèmes de scellement auto-polymériser.

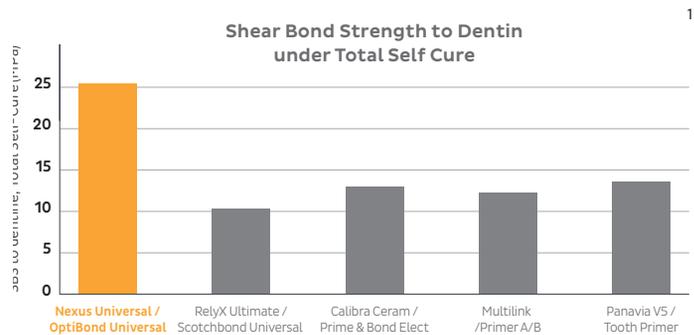


## Grande stabilité des teintes

Nexus Universal est équipé de son propre système initiateur Redox qui est courant dans les systèmes initiateur BPO/tertiaire. Il élimine pratiquement la décoloration.

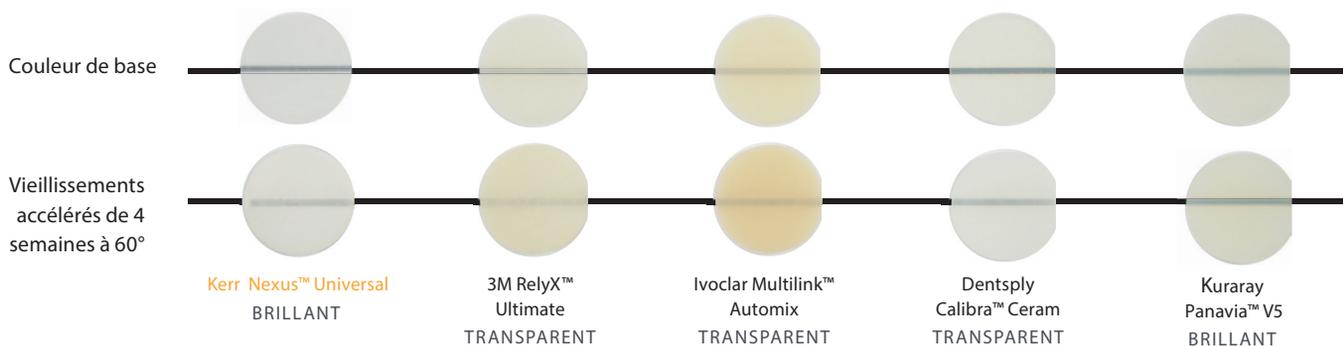


## Choisissez votre adhésif

Nexus Universal offre une compatibilité totale avec n'importe quel adhésif universel en mode auto-polymérisant y compris avec Optibond Universel et autres systèmes Optibond. Ayez confiance en votre adhésion, peu importe le bonding que vous utilisez. Pas besoin d'activateur pour une adhésion auto-polimérisant.

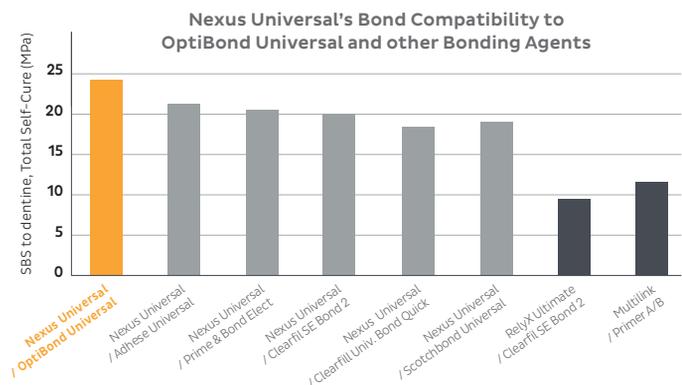

## Haute performance, peu importe la surface

Nexus Universal est compatible avec une variété de restauration indirectes et de matériaux CAD/CAM, y compris la résine, la céramique, zircone, ou alliages de métaux, oxyde d'aluminium, disilicate de lithium (e-max) et titane.

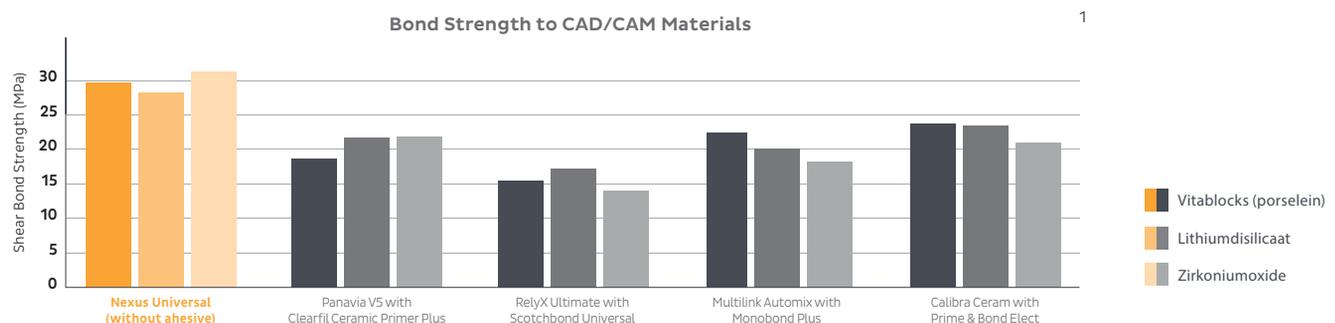


# Nexus Universal Chroma – indicateur de couleur

Lorsque la **couleur rose** disparaît, vous pouvez commencer le nettoyage !



Le ciment est rose lorsqu'il est appliqué et s'estompe progressivement à la teinte du ciment. Tack-cure et durcissement autopolymérisant pour plus de contrôle sur les couronnes et bridges. Le nettoyage est facile avec le changement de couleur rose, à la couleur du ciment. Ainsi, le risque d'excès de ciment est évité.

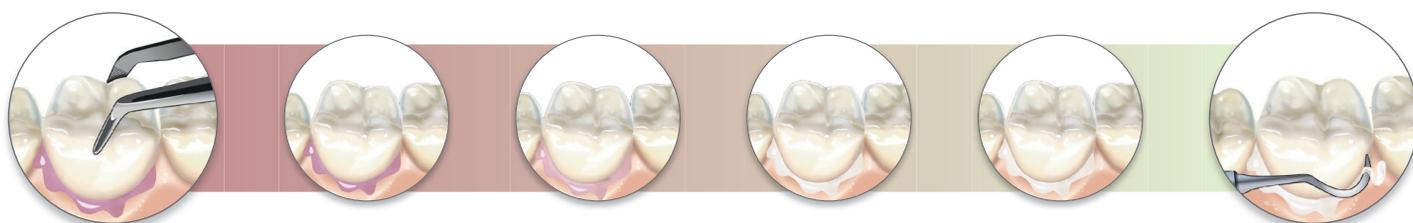

Application

Nettoyage

Nexus™, OptiBond™ en One-Peel™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de Kerr corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs.

## Nexus™ Universal, informations de commande

REF/ Nr.	Description
36990	Kit d'essai - 1 x 5 g seringue (Clear), 8 x unidoses OptiBond Universal, accessoires
36989	Kit d'intro - 4 x 5 g seringue (Clear, Clear avec Chroma, White, Yellow), 1 x OptiBond Universal, accessoires
36991	Recharge - 2 x 5 g seringue, Clear
36992	Recharge - 2 x 5 g seringue, Clear avec Chroma
36993	Recharge - 2 x 5 g seringue, White
36994	Recharge - 2 x 5 g seringue, White Opaque
36995	Recharge - 2 x 5 g seringue, Yellow
36996	Recharge - 2 x 5 g seringue, Bleach
36999	Embout - 50-pak Regular
37000	Embout - 50-pak Wide



**24 mois de conservation, sans réfrigération**

